



ПРОДУКЦИЯ Б. БРАУН ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Чистота — залог
безопасности



Софта-ман

Кожный антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук

- Готовое к использованию средство на основе **этилового спирта**
- Не содержит аллергенных отдушек
- Обеспечивает повседневный уход за руками, восстанавливает барьерные свойства кожи

Софта-ман содержит этанол (45%), 1-пропанол (18%), бисабол и другие вспомогательные компоненты, флаконы объемом 100, 500 и 1000 мл, поставляются с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ или дозатором; диспенсопак 1000 мл

Софта-ман гель

Кожный антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук

- Готовое к использованию средство на основе **этилового спирта** в виде вязкой жидкости
- Экономное расходование средства
- Обеспечивает повседневный уход за руками, восстанавливает барьерные свойства кожи

Софта-ман гель содержит этанол (45%), 1-пропанол (18%), бисабол и другие вспомогательные компоненты, в т. ч. карбополимер; флаконы объемом 100, 500 и 1000 мл, поставляются с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ или дозатором; диспенсопак 1000 мл

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК



Софта-ман Изо

Кожный антисептик для обработки рук и операционного поля

- Готовое к использованию универсальное средство
- Содержит пропиловые спирты высокой степени очистки
- Обладает пролонгированным действием
- Обеспечивает повседневный уход за руками, восстанавливает барьерные свойства кожи

Софта-Ман Изо содержит 2-пропанол (45%), 1-пропанол (30%), бисаболл и другие вспомогательные компоненты; объем 100 и 1000 мл во флаконах с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ, 1000 мл в диспенсопаке



Софта-ман Изо Вискораб

Кожный антисептик для обработки рук и операционного поля («вязкое втирание»)

- Готовое к использованию универсальное средство в виде вязкой жидкости
- Содержит пропиловые спирты высокой степени очистки
- Экономное расходование средства
- Обладает пролонгированным действием, ухаживает за кожей рук

Софта-Ман Изо Вискораб содержит 2-пропанол (45%), 1-пропанол (30%), бисаболл и другие вспомогательные компоненты; объем 75 мл, 500 мл и 1000 мл во флаконах с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ или дозатором



Софтасепт Н

Кожный антисептик для обработки операционного поля

- Средство на основе **этилового спирта** для обработки операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов
- Содержит спирты высокой степени очистки
- Спрей для обработки кожи перед постановкой и уходом за катетером во время проведения инфузионной терапии

Софтасепт Н содержит этанол (74%), 2-пропанол (10%), вспомогательные компоненты и воду; объем 1000 мл во флаконе с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ, спрей – 250 мл



Софтасепт Н окрашенный

Кожный антисептик для обработки операционного поля

- Средство на основе **этилового спирта** для обработки операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов
- Позволяет обозначать границы обрабатываемого поля
- Содержит высококачественные безопасные красители

Софтасепт Н содержит этанол (74%), 2-пропанол (10%), вспомогательные компоненты и воду; объем 1000 мл во флаконе с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ

ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ



НОВИНКА



Софтасепт С

Кожный антисептик для обработки инъекционного и операционного поля

- Готовое к использованию универсальное средство
- Содержит 2% хлоргексидин на основе изопропилового спирта
- Является препаратом выбора* для обработки кожи с целью профилактики инфекций кровотока при проведении инфузионной терапии

Софтасепт С содержит 2-пропанол (70%), хлоргексидин (2%), вспомогательные компоненты; объем 1000 мл во флаконах с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ, спрей 250 мл, спрей 100мл

*CDC — руководство по профилактике катетер-ассоциированных инфекций 2011 (USA), Федеральные клинические рекомендации НП «НАСКИ» 2018 (Россия), ГОСТ Р 52623.3 — 2015



Софтасепт Изо окрашенный

Кожный антисептик для обработки операционного поля

- Антисептик на основе пропиловых спиртов для обработки операционного поля
- Позволяет обозначать границы обрабатываемого поля
- Содержит высококачественные безопасные красители

Софтасепт Изо окрашенный содержит 1-пропанол (30%), 2-пропанол (45%), функциональные компоненты, красители и воду; объем 1000 мл во флаконах с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ



Софтаскин

Жидкое мыло для гигиенического мытья рук

- Гипоаллергенное, не содержит искусственных красителей
- Нейтральный pH — 5,5, не зависит от жесткости воды
- Пониженное пенообразование
- Подходит для частого применения

Софтаскин — жидкое мыло на основе ПАВ, содержит аллантоин; флаконы объемом 500 и 1000 мл, поставляются с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ или дозатором



Софтамед

Кожный антисептик для обработки инъекционного и операционного поля

- Универсальный кожный антисептик на водной основе
- Антисептик для обработки кожи инъекционного и операционного полей
- Антисептик для санитарной обработки кожи пациентов перед операцией, санитарной обработки больных в реанимации

Софтамед содержит в качестве действующих веществ (ДВ) бензетоний хлорид 0,1 %, ПАВ и стабилизирующие добавки



ЧАСТИЧНАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ ПАЦИЕНТА

ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ



Браунодерм окрашенный

Кожный антисептик для обработки операционного поля

- Готовый к применению спиртовой кожный антисептик на основе повидон-йода
- Обладает пролонгированным действием и эффективен против широкого спектра микроорганизмов
- Содержит высококачественные безопасные красители для обозначения операционного поля

Браунодерм окрашенный содержит 2-пропанол (50%), повидон-йод (1%); флаконы объемом 1000 мл удобной для удерживания формы со структурированной поверхностью, с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ

Браунодин раствор 7,5 %

Антисептик широкого спектра действия







- Применяется для обработки кожи и слизистых
- Широкий спектр действия
- Бактерицидное действие развивается в течение 15 секунд
- Препарат выбора* в офтальмологии, акушерстве и гинекологии
- Не обладает раздражающим действием

Браунодин раствор 7,5 % содержит повидон-йод (10% активного йода), ПЭГ

* Evidence-based surgery for cesarean delivery: an updated systematic review Joshua D. Dahlke, MD; Hector Mendez-Figueroa, MD; Dwight J. Rouse, MD; Vincenzo Berghella, MD; Jason K. Baxter, MD, MSCP; Suneet P. Chauhan, MD, ESCRS Guidelines for Prevention and Treatment of Endophthalmitis. Following Cataract Surgery: Data, Dilemmas and Conclusions 2013, Florian Brill, Dr. Johannes Georg Böttrich


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


ОБРАБОТКА РУК, ИНЪЕКЦИОННОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ


Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Софта-Ман	диспенсопак	1000	12	19359
	Софта-Ман	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19195
	Софта-Ман	флакон с дозатором	500	20	19194
	Софта-Ман	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	100	20	19193
	Софта-Ман гель	диспенсопак	1000	12	19547
	Софта-Ман гель	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19191
	Софта-Ман гель	флакон с дозатором	500	20	19190
	Софта-Ман гель	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	100	20	19189
	Софта-Ман изо	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19252 BMR-A-19252 *
	Софта-Ман изо	диспенсопак	1000	12	19358
	Софта-Ман изо	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	100	20	19298
	Софта-Ман Изо Вискораб	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19742
	Софта-Ман Изо Вискораб	флакон с дозатором	500	20	19819
	Софта-Ман Изо Вискораб	флакон с крышкой флип-топ	75	65	180115
Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Софтасепт Н	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19251
	Софтасепт Н спрей	флакон с распылителем	250	20	19249
	Софтасепт Н окрашенный	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19250
Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Софтасепт ИЗО окрашенный	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19741 BMR-A-19741 *


* Произведено в России



Наименование		Форма выпуска	Объем, мл	Штук в уп.	Кат №
	Софтаскин	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19198
	Софтаскин	флакон с дозатором	500	20	19197
	Софтаскин	диспенсопак	1000	12	19360

Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Софтасепт С	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19851 BMR-A-19851 *
	Софтасепт С	флакон с распылителем	250	20	19850
	Софтасепт С	флакон с распылителем	100	30	BMR-A-19849 *

Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Софтамед	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	180113
	Софтамед	флакон с дозатором	250	20	180112
	Софтамед	флакон с распылителем	75	20	180111

Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Браунодерм окрашенный	флакон специальной формы со структурированной поверх- ностью, с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	1000	10	19848

Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Браунодин раствор 7,5 %	бутылка со специальной поверхностью против соскальзывания	1000	10	19670
	Браунодин раствор 7,5 %	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	500	20	19669
	Браунодин раствор 7,5 %	флакон с распылителем	250	20	19668
	Браунодин раствор 7,5 %	флакон с защитой первого вскрытия и крышкой флип-топ	100	1/20	19667

*Произведено в России



Гексакварт форте

Универсальное средство для дезинфекции поверхностей, генеральных уборок, ПСО

- Низкие рабочие концентрации, эффективен в отношении плесневых грибов
- Применяется в роддомах, палатах новорожденных, отделениях неонатологии
- Обладает отличными моющими свойствами, не требует смывания после обработки поверхностей

Гексакварт форте содержит в качестве действующих веществ (ДВ) четвертичные аммониевые соединения (ЧАС): алкилдиметилбензиламмония хлорид 20% и дидецилдиметиламмония хлорид 7,9%; неионогенные ПАВ. Флаконы по 1 л, канистры по 5 л



Мелисептол Фоам

Быстродействующее средство для обработки небольших поверхностей в виде пены

- Микроцидный эффект — от 1 минуты
- Обладает отличными моющими свойствами за счет содержания ПАВ. Не содержит альдегидов
- Рекомендуется для обработки кюветов, ультразвуковых датчиков, автоматизированных инфузионных станций, гемодиализной аппаратуры
- Не оставляет следов на поверхности

Мелисептол Фоам содержит: 1-пропанол (17%), дидецилметиламмоний-хлорид (0,225%), неионогенные ПАВ



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПРОТИРАНИЯ



Мелисептол рапид

Быстродействующее средство для обработки небольших поверхностей

- Бактерицидный эффект — от 1 минуты
- Обладает отличными моющими свойствами за счет содержания ПАВ. Не содержит альдегидов
- Не оставляет следов на поверхности
- Рекомендуются для обработки диагностического оборудования, инфузионных станций, стоматологических наконечников, моторных систем

Мелисептол рапид содержит: 1-пропанол (50%), дидецилметиламмоний-хлорид (0,075%), неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Флисовые салфетки с Мелисептолом

Обработка медицинских изделий методом протирания: насадок, наконечников, моторов и приводов, а также кабелей, блоков и электрических консолей к ним, инфузионных станций, шприцевых насосов и пр.

Трехкомпонентная система: диспенсер (3 или 0,7 л), салфетки*, Мелисептол рапид



* описание продукции и информацию для заказа см. на стр. 20-22 каталога



Хелизим

Ферментное средство для очистки гибких эндоскопов и инструментов

- Быстродействующий ферментный очиститель для гибких эндоскопов
- Имеет нейтральный pH
- Применяется при ультразвуковой обработке
- Рабочие растворы используются в течении суток

Хелизим содержит 5% анионных сурфактантов, 5% неионных сурфактантов, фермент субтилизин, дисперсионные агенты и ингибиторы коррозии. Флаконы по 1 л



Стабимед Фреш

Средство для дезинфекции инструментов, совмещенной с ПСО

- Отлично очищает от крови и физиологических жидкостей
- Применяется при ультразвуковой обработке
- ПСО инструментов, совмещенное с дезинфекцией, предварительная и окончательная очистка эндоскопов: рабочие растворы от 1%

Стабимед Фреш содержит в качестве действующих веществ кокопропилендиамин (20%), ПАВ, ингибитор коррозии и другие вспомогательные компоненты. Флаконы по 1 л, канистры по 5 л*.

* **Дополнительно:** ключ для снятия крышки с 5-литровой канистры «Фисчер», кат. № 9205004 (см. с. 23)

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЭНДОСКОПОВ



Стабимед Ультра

Быстродействующий дезинфектант

- ДВУ гибких эндоскопов 2% — 10 мин
- Может использоваться как для ручной, так и для машинной обработки
- Обработка поверхности, проведение генеральных уборок

Стабимед Ультра содержит в качестве действующих веществ (ДВ) перкарбонат натрия 45%, тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) 25%, лимонную кислоту 15%, ПАВ, ингибиторы коррозии и другие вспомогательные вещества

* **Дополнительно:** ключ для снятия крышки с 4-литровой банки «Стабимед Ультра», кат. № 3908460



Специалистам

В соответствии с «Утвержденными методами обработки инструментов Aescular» рекомендуются:

- для обработки методом протирания моторных систем салфетки с Мелисептолом рапид (50% 1-пропанол);
- для ручной очистки инструментов с опусканием в дезинфицирующий раствор: Стабимед Фреш (не содержит альдегид, фенол и четверичные аммониевые соединения pH ~ 9);
- для машинной щелочной очистки и термической дезинфекции: Хелиматик Клинер алкалайн, Хелиматик Нейтрализер Форте, Хелиматик Нейтрализер С.



В соответствии с «Утвержденными методами обработки инструментов Aescular» рекомендуется для машинной щелочной очистки и термической дезинфекции (см. с. 26–27)



Хелиматик Клинер алкалайн, Нейтрализер С, Нейтрализер форте

- Средство для мойки изделий, устойчивых к действию щелочных растворов
- Нейтрализация средства осуществляется на этапе ополаскивания в МД машине
- Рекомендуется для очистки инструментов с органическими загрязнениями

Хелиматик Клинер алкалайн содержит в качестве действующего вещества натрия гидроокись — $4,9 \pm 0,2\%$, композицию из $< 5\%$ анионогенных и $< 5\%$ неионогенных ПАВ, ингибиторы коррозии. pH 0,5% раствора средства — 11,5–12,1

Хелиматик клинер МА

Средство для механизированной обработки инструментов

- Слабощелочное средство на основе ферментов для механизированной обработки инструментов
- Обладает хорошими моющими свойствами при низком пенообразовании
- Рекомендуется для механизированной очистки (мойки) изделий из анодированного алюминия, моторных систем и пр.

Хелиматик Клинер МА содержит в качестве действующих веществ (ДВ) субтилизин 2 %, поликарбоксилаты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии, pH средства — 10,5 %

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЭНДСКОПОВ В МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ (МД) МАШИНАХ



ВНИМАНИЕ!
Для открытия 5-литровой канистры необходим специальный ключ «Марвин». Заказывается дополнительно (см. с. 23)



Хелиматик Клинер энзиматик

Ферментное нейтральное средство для очистки гибких эндоскопов и инструментов

- Энзимное средство для механизированной обработки инструментов и моторных систем
- Эффективно для предварительной и окончательной очистки гибких эндоскопов
- Подходит для предстерилизационной очистки (мойки) изделий медицинского назначения из термостабильных и термолабильных материалов

Хелиматик Клинер энзиматик содержит в качестве действующего вещества протеолитический фермент субтилизин — $3,0 \pm 0,2\%$, а также $<5\%$ неионогенных и $<5\%$ анионогенных ПАВ, pH средства — 5,0–6,5. Канистры по 5 л



Хелиматик дезинфектант

Универсальное средство для дезинфекции инструментов и эндоскопов

- Средство для механизированной ДВУ гибких эндоскопов в моюще-дезинфицирующих машинах
- Дезинфектант для термо-химической механизированной обработки термолабильных изделий
- Ручная дезинфекция, ДВУ гибких эндоскопов, стерилизация эндоскопов


Хелиматик дезинфектант содержит в качестве действующих веществ (ДВ) глутаровый альдегид (20%), функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. Флаконы по 1 л, канистры по 5 л.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Наименование		Форма выпуска	Объем, мл	Штук в уп.	Кат №
	Мелисептол рапид	канистра	5000	1	19070* BMR-A-19070
	Мелисептол рапид	флакон	1000	10	18984
	Мелисептол рапид	флакон с распылителем	750	12	19910 BMR-A-19199

Наименование	Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №	
	Мелисептол Фоам	флакон с распылителем	750	12	19799


Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №
	Гексакварт форте	флакон	1000	10	19239
	Гексакварт форте	канистра	5000	1	19240*

Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г Кол-во, шт.	Кат. №
	Тест-полоски для препарата Гексакварта Форте	упаковка	100 шт.	BMR-A-13555
	Тест-полоски для препарата Хелиматик Дезинфектант	упаковка	100 шт.	BMR-A-13556

* Дополнительно: ключ для снятия крышки с 5-литровой канистры «Фисчер», кат. № 9205004 (см. с. 23)

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЭНДСКОПОВ



Наименование	Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №	
	Хелизим	флакон	1000	10	18983

Наименование	Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №	
	Стабимед ФРЕШ	флакон	1000	10	180066
	Стабимед ФРЕШ	канистра	5000	1	180067*
	Стабимед УЛЬТРА	банка	800	6	19934
	Стабимед УЛЬТРА	ведро	4000	1	19935

Механизированная обработка инструментов и эндоскопов в моюще-дезинфицирующих машинах

Наименование	Форма выпуска	Объем, мл/г	Штук в уп.	Кат №	
	Хелиматик дезинфектант	канистра	5000	1	18982**
	Хелиматик клинер алкалайн	канистра	5000	1	19544**
	Хелиматик нейтралайзер С	канистра	5000	1	19543**
	Хелиматик клинер МА	канистра	5000	1	19947**
	Хелиматик клинер энзиматик	канистра	5000	1	19546**
	Хелиматик нейтралайзер форте	канистра	5000	1	19584**

* Дополнительно: ключ для снятия крышки с 5-литровой канистры «Фисчер», кат. № 9205004 (см. с. 23)

** Дополнительно: ключ для снятия крышки 5-литровой канистры «Марвин», кат. № 3908187 (см. с. 23)



Настенный дозатор

Длинный рычаг / короткий рычаг

- Предназначен для дозирования мыла, кремов, антисептиков для рук
- Корпус из анодированного алюминия, помпа из нержавеющей стали, автоклавируемая

Настенный дозатор, запираемый на ключ

- Корпус из ударопрочного пластика
- Контроль за использованием содержимого флакона



Кронштейны настенные

Под флаконы объемом 500 и 1000 мл с дозатором

- Предназначены для флаконов с мылом и антисептиками для рук
- Выполнены из нержавеющей стали
- Для стандартных евро-флаконов объемом 0,5 и 1 л

Держатели прикроватные

Под флаконы объемом 500 мл с дозатором

- Предназначены для флаконов с мылом, кремами, антисептиками для рук
- Для стандартных евро-флаконов объемом 0,5 л

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ



Дозатор Б. Браун настенный

Дозатор для флакона Диспенсопак 1000 и 500 мл

- Предназначен для дозирования мыла и антисептиков
- Возможность изменения объема дозируемого препарата
- Позволяет использовать спадающиеся флаконы Б. Браун Диспенсопак
- Система, контролирующая остаток средства во флаконе
- Корпус дозатора запирается на ключ
- Контроль за расходом дезсредств персоналом (опция)

Дозатор настенный: корпус и помпа из ударопрочного пластика и спадающийся флакон из полностью перерабатываемого материала



Дозатор настенный бесконтактный

Под флаконы объемом 1000 мл

- Предназначен для бесконтактного дозирования мыла, кремов, антисептиков
- Возможность изменения объема дозируемого препарата
- Сенсорные датчики, обеспечивающие выдачу препарата при поднесении рук к прибору
- Возможность выдачи препарата при разрядке элементов питания

Дозатор настенный бесконтактный: корпус из анодированного алюминия, помпа из нержавеющей стали



Насадка-спрей на флакон

Насадка для флаконов объемом 1000 мл

- Эргономичный дизайн
- Подходит для многоразового использования

Насадка на флакон помповая дозирующая

Насадка для полимерных флаконов объемом 500 и 1000 мл

- Подходит для многоразового использования



Диспенсер с салфетками

с объемом заполнения дезинфектантами 500 и 2500 мл

- Флисовые безворсовые салфетки Б.Браун плотностью 65 г/м², 100 шт. (19 × 36 см) и 25 шт. (24 × 28 см)
Флисовые безворсовые салфетки Б.Браун Эко плотностью 55 г/м², 120 шт. (19 × 36 см) и 60 шт. (15 × 20 см)
- Не связывают активные действующие вещества дезинфектанта и полностью высвобождают их на дезинфицируемую поверхность
- Закрывающаяся со щелчком крышка предотвращает контаминацию и испарение раствора

Диспенсер: ударопрочный пластик, **салфетки:** безворсовый нетканый материал, 100% полиэстер

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДОЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



Мельсептомат Джи

Децентрализованный автоматический дозатор

- Предварительный выбор дозировки с помощью ключа в селекторе
- Возможность приготовления растворов 0,25 % – 0,5 % – 1,0 % – 2,0 % – 4,0 % концентрации
- Микропроцессорное управление дозирования с учетом давления воды в системе, вязкости, плотности и pH концентрата дезсредств

Мельсептомат Джи: корпус из нержавеющей стали, удобная для обслуживания модульная конструкция. Гарантия 3 года



Центральная дозирующая станция


для непрерывной подачи средств в моеще-дезинфицирующие машины

- Автоматическое наполнение удаленного контейнера для непрерывной подачи средств
- Экономия времени и стоимости по сравнению с использованием обычных 5 или 10 литровых канистр
- Рекомендуется для использования средств для машинной обработки, например, линейки Хелиматик
- Не подходит для средств с высоким риском воспламенения, основанных на надуксусной кислоте или перекиси водорода

Станция поставляется в составе: дозирующей станции, включая источник питания; удаленного контейнера с гибкой медиа-линией в защитном кожухе, с клапанами; линии электрического контроля, трехжильная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ








Наименование	Форма выпуска	Объем, мл/г	Кат №
 <p>Мельсептомат Джи Система децентрализованного автоматического дозирования</p>	шт.	для 5000 мл канистр	3908420
 <p>Дозатор настенный, сенсоры, транспондеры</p>	шт.	1000/500	по запросу
 <p>Дозатор настенный бесконтактный</p>	шт.	1000	3908393
 <p>Поддон для настенного дозатора</p>	шт.	—	3908394
 <p>Дополнительная помпа для настенного дозатора</p>	шт.	—	6510177
 <p>Настенный дозатор, длинный рычаг TLSA26/24</p>	шт.	1000	4401253
 <p>Настенный дозатор, короткий рычаг TA26/24</p>	шт.	1000	4401255
 <p>Настенный дозатор ER-T (запираемый на ключ)</p>	шт.	1000	4401316



Наименование		Форма выпуска	Объем, мл/г	Кат №
	Настенный кронштейн под флакон	шт.	1000	3908340
	Настенный кронштейн под флакон	шт.	500	3908339
	Кронштейн прикроватный под флакон	шт.	1000	3908341
	Кронштейн прикроватный под флакон	шт.	500	3908342
	Держатель для флаконов прикроватный	шт.	500	1416337
	Сигнальная рамка для дозатора желтая	шт.	по запросу	1419034
	Сигнальная рамка для дозатора красная	шт.	по запросу	1419035
	Ключ Фисчер для канистры Стабимед Фреш	шт.	для канистры 5000 мл	9205004
	Ключ для канистры Марвин	шт.	для канистр 5000 мл	3908187
	Ключ для емкости Стабимед Ультра	шт.	для емкости 4000 г	3908460

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

	Наименование	Форма выпуска	Объем, мл/г Кол-во, шт.	Кат. №
	Диспенсер для флисовых салфеток большой с серой крышкой	шт.	3000 мл	19873
	Салфетки Б. Браун флисовые для большого диспенсера, плотность 65 г/м ² (190 × 360 мм)	6 рулонов в упаковке	100 шт.	19164
	Салфетки Б. Браун Эко флисовые для большого диспенсера Есо, плотность 55 г/м ² (190 × 360 мм)	6 рулонов в упаковке	120 шт.	19726
	Диспенсер для флисовых салфеток малый с серой крышкой	шт.	700 мл	19874
	Салфетки Б. Браун флисовые для малого диспенсера, плотность 65 г/м ² (240 × 280 мм)	10 рулонов в упаковке	25 шт.	19183
	Салфетки Б.Браун мини Эко флисовые для малого диспенсера, плотность 55 г/м ² (150 × 200 мм)	12 рулонов в упаковке	60 шт.	19725
	Насадка-распылитель Б. Браун 28/410 мм		—	3908012
	Насадка-распылитель 28/410/165 мм, тригер		—	BMR-A-X138
	Насадка на флакон помповая дозирующая белая 28/410/210мм		1000	BMR-A-82177
	Насадка на флакон помповая дозирующая белая 28/410/170мм	шт.	500	BMR-A-82176

ЗАПОЛНЕНИЕ ДИСПЕНСЕРА И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФЛИСОВЫХ САЛФЕТОК Б. БРАУН



1. Наденьте перчатки



2. В чистый, продезинфицированный и сухой диспенсер вставьте рулон флисовых салфеток



3. Заполните диспенсер готовым к использованию раствором дезинфицирующего средства — Мелисептолом или Гексаквартом



4. Протащите флисовую салфетку через отверстие в крышке для диспенсера. Оторвите первую салфетку, чтобы убедиться что диспенсер заправлен правильно.
Подождите 10 минут до тех пор, пока рулон флисовых салфеток полностью не пропитается раствором дезинфицирующего средства и не станет влажным



5. Закройте крышку. Наклейте необходимую этикетку с названием дезинфицирующего средства

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ МОТОРНЫХ СИСТЕМ

Виды инструментов
и оборудования

Электронные приборы



ПОГРУЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

Приводы, моторы



ПОГРУЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

Наконечники, насадки



ПОГРУЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

Рабочие инструменты (многоразовые)



Ручная обработка: предварительная очистка (вода)

I ЭТАП
Предваритель-
ная очистка
или ПСО

Предварительная
очистка методом про-
тирания



Флисовые салфетки
Б. Браун, диспенсер

Предстерилизационная очистка (ПСО) методом
протираания 50 % пропанол



Мелисептол рапид, салфетки Б. Браун, диспенсер

ПСО методом погружения,
растворы не должны со-
держат фенолов, альде-
гидов, ЧАС, pH ~ 9



Стабимед Фреш

Стабимед Фреш
НЕ СОВМЕЩАЕТ
С АЛЬДЕГИДАМИ!

II ЭТАП
Дезинфекция

Дезинфекция методом про-
тирания 50 % пропанол
(погружать нельзя)



Мелисептол рапид,
салфетки Б. Браун,
диспенсер

Дезинфекция методом протираания,
50 % пропанол (погружать нельзя)



Мелисептол рапид, салфетки Б. Браун, диспенсер

Дезинфекция, совмещен-
ная с ПСО погружением,
растворы не должны
содержат фенолов,
альдегидов, ЧАС,
pH ~ 9



Стабимед Фреш

ИЛИ

II ЭТАП
Машинная
мойка
в моще-
дезинфици-
рующих (МД)
машинах

Не подвергаются
машинной обработке,
не требуют
стерилизации

Машинная обработка (только на специальных сетках)

Хелиматик Клинер Алкалайн + нейтрализатор:
Хелиматик Клинер Энзиматик/
Хелиматик Клинер МА



Термическая дезинфекция в МД машинах max 93 °C

Паровая стерилизация, форвакуумная, 134 °C

Стерилизация

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ



Медицинские изделия (инструменты, контейнеры и принадлежности)

Инструменты из стандартных материалов (нержавеющая сталь)



Инструменты и медицинские изделия содержащие алюминий, композитные материалы



Подготовка на месте применения в оперблоке*

I ЭТАП
Дезинфекция

Ручная обработка (дезинфекция методом погружения)

Погружение в рабочие растворы (не должны содержать фенолов, альдегидов, ЧАС, pH рабочего раствора ~9)

Не рекомендуется использовать препараты на основе надуксусной кислоты



Стабимед Фреш (1–2%)

или

или

Ручная обработка

Машинная обработка

Машинная обработка

Ручная обработка

ПСО совмещенная с дезинфекцией методом погружения (растворы не должны содержать фенолов, альдегидов, ЧАС, pH p-ра ~ 9) Изделие погружают в раствор, обеспечивая удаление загрязнения с помощью салфеток



Стабимед Фреш (1–2%)

Машинная мойка в моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ)



Щелочные моющие средства: Хелиматик Клинер Алкалайн + нейтрализация: Хелиматик Нейтрализер форте, Нейтрализер С

Машинная мойка в моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ)



Нейтральные или слабощелочные моющие средства: Хелиматик Клинер Энзиматик, Хелиматик клинер МА

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА!

ПСО совмещенная с дезинфекцией методом погружения (растворы не должны содержать фенолов, альдегидов, ЧАС, pH p-ра ~ 9)



Стабимед Фреш (1–2%)

II ЭТАП
Ручная ПСО совмещенная с дезинфекцией или машинная мойка в моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ)

Машинная дезинфекция в МД машинах

Стерилизация


Термическая дезинфекция в МДМ машинах t max 93 °C

Паровая стерилизация 134 °C, химическая стерилизация в исключительных случаях (не рекомендуется препараты содержащие перекисные соединения, надуксусную кислоту).


* Хранение сухих загрязненных инструментов допустимо не более 6 часов

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ И ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ

Виды
инструментов
и оборудования

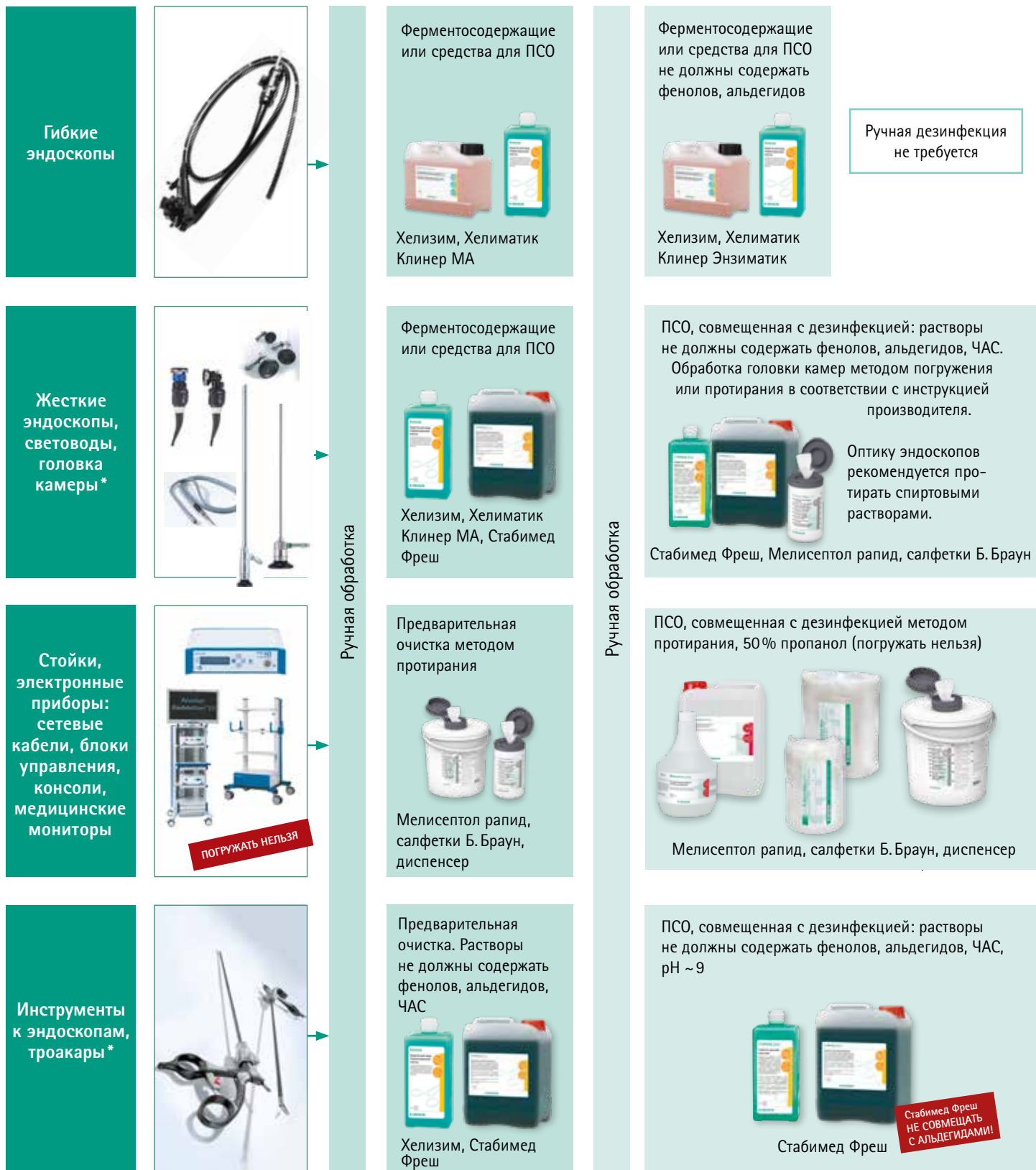

* Дезинфекция, совмещенная с PCO и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним проводится строго в соответствии с инструкцией производителя.

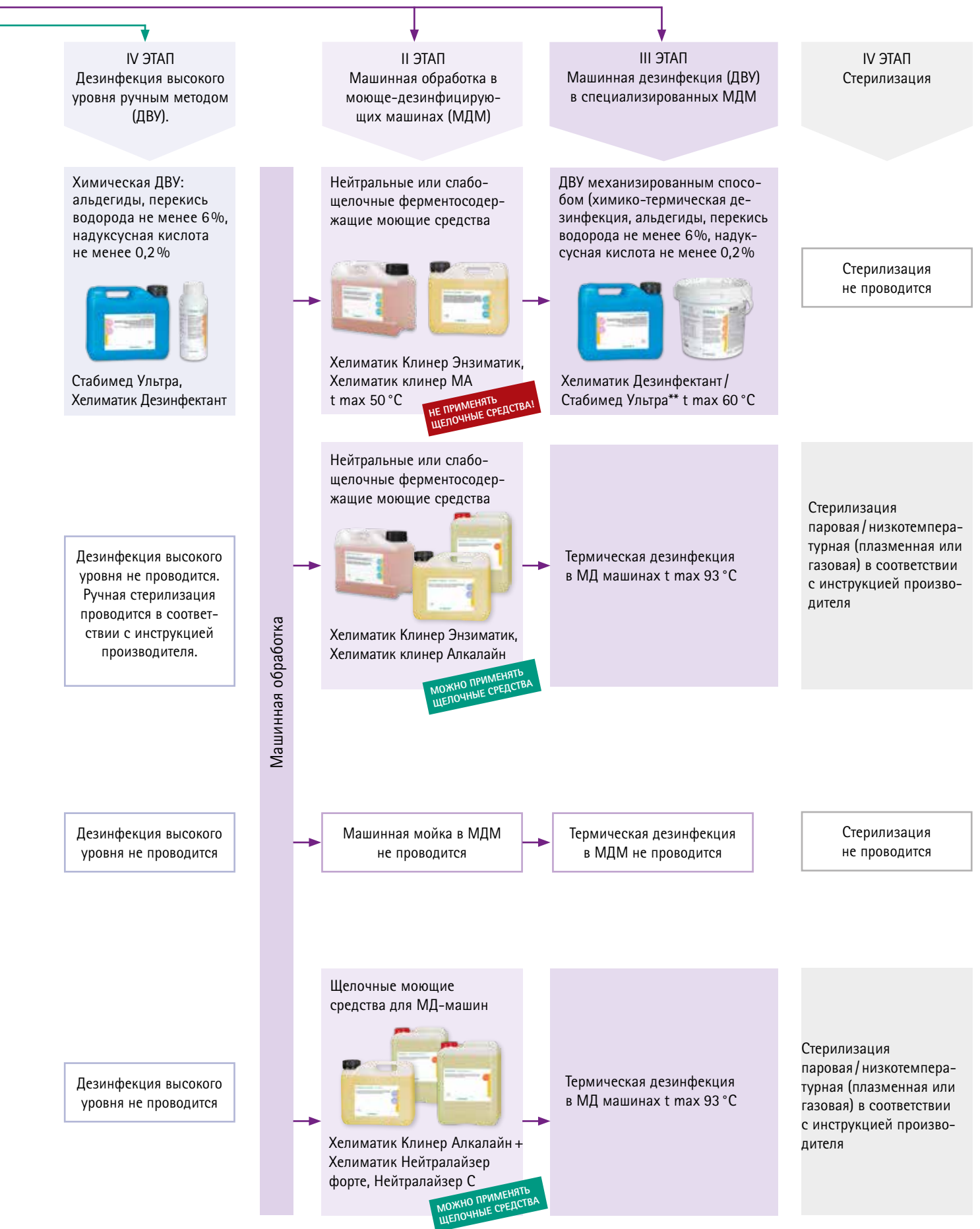

** В зависимости от типа и рекомендаций производителя машин



ООО «Б.Браун Медикал» | www.bbraun.ru

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com, тел.: +7 (812) 320-40-04, факс: +7 (812) 320-50-71
117246, Москва, Научный проезд, д. 17, тел.: +7 (495) 777-12-72, факс: +7 (495) 745-72-32

 [www.vk.com/bbraunrussia](https://vk.com/bbraunrussia)  www.fb.com/bbraunrussia

Воронеж
Екатеринбург
Краснодар

(473) 252 8015
(343) 286 1654
(861) 259 7594

Красноярск
Н. Новгород
Новосибирск

(391) 258 1999
(831) 281 8299
(383) 319 1396

BMR-B-001717

